



TS SYSTEM

Имплантат

- 026** Имплантат TSIII SA
- 028** Имплантат TSIII BA
- 030** Имплантат TSIV SA
- 032** Установочный адаптер
- 032** Винт заглушка
- 033** Формирователь десны
- 034** Индивидуальный формирователь десны

Компоненты

- 035** Процедура протезирования / Схема 1
- 036** Transfer абатмент
- 042** Угловой абатмент
- 044** FreeForm ST абатмент
- 046** Np-Cast абатмент

- 047** Процедура протезирования / Схема 2
- 048** Multi абатмент
- 054** Угловой Multi абатмент

- 055** Процедура протезирования / Схема 3
- 056** Convertible абатмент

- 062** Процедура протезирования / Схема 4
- 063** Stud абатмент
- 065** Port абатмент
- 068** Угловой Port абатмент

- 070** Процедура протезирования / Схема 5
- 071** Link абатмент
- 074** ZioCera абатмент
- 076** Угловой ZioCera абатмент

- 077** Процедура протезирования / Схема 6
- 078** Quick Temporary абатмент
- 080** Pre-Milled абатмент
- 080** Модуль для сканирования Scan Body

Имплантат TSIII SA

- Имплантат погруженного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°.
- Поверхность SA подвергается пескоструйной обработке оксидом алюминия и травлению кислотой.
- Конусообразное тело имплантата обеспечивает высокую начальную стабильность.
- Мелкая резьба: Увеличение начальной стабильности в мягкой костной ткани.
- Штопорная резьба обеспечивает самонарезающий эффект.

Имплантат ультраширокий

- Используется при немедленной имплантации в лунку удаленного моляра и замене не прижившегося имплантата.
- Оптимальная конструкция верхушки имплантата, которая позволяет получить устойчивое начальное крепление при установке даже на 3мм ниже лунки зуба.
- Рекомендуемый вращающий момент при вкручивании: 40Нсм.

* **Примечание:** при реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром более 4.5мм.



Имплантат без установочного адаптера

Код заказа: код имплантата (пример: TS3S4010S)

Имплантат с установочным адаптером

(имплантат + установочный адаптер + винт-заглушка)

Код заказа: **B** + код имплантата (пример: **B**TS3S4010S)

Ø 3.0

Шестигранник 2.1



Длина	8.5	10	11.5	13
	TS3M3008S	TS3M3010S	TS3M3011S	TS3M3013S

Ø 3.5

Шестигранник 2.1



Длина	8.5	10	11.5	13
	TS3M3508S	TS3M3510S	TS3M3511S	TS3M3513S

Ø 4.0

Шестигранник 2.5



Длина	7	7	8.5	10	11.5	13
	TS3S4006S	TS3S 4007S	TS3S 4008S	TS3S 4010S	TS3S 4011S	TS3S 4013S

Экстра
Короткий

Ø 4.5

Шестигранник 2.5



Длина	7	7	8.5	10	11.5	13
						
	Экстра Короткий					
	TS3S 4506S	TS3S 4507S	TS3S 4508S	TS3S 4510S	TS3S 4511S	TS3S 4513S

Ø 5.0

Шестигранник 2.5



Длина	6	6	6	7	8.5	10	11.5	13
								
	Экстра Короткий	Экстра Короткий	Короткий					
	TS3S 5004S	TS3S 5005S	TS3S 5006S	TS3S 5007S	TS3S 5008S	TS3S 5010S	TS3S 5011S	TS3S 5013S

Ø 5.5

Шестигранник 2.5



Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Короткий					
	TS3S 5506S	TS3S 5507S	TS3S 5508S	TS3S 5510S	TS3S 5511S	TS3S 5513S

Ультраширокий

Ø 6.0

Шестигранник 2.5



Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Короткий					
	TS3S 6006S	TS3S 6007S	TS3S 6008S	TS3S 6010S	TS3S 6011S	TS3S 6013S

Ø 7.0

Шестигранник 2.5



Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Короткий					
	TS3S 7006S	TS3S 7007S	TS3S 7008S	TS3S 7010S	TS3S 7011S	TS3S 7013S


Номинальные и фактические диаметры могут незначительно отличаться.

Важно: для установки короткого имплантата настоятельно рекомендуется достаточный период заживления.

Имплантат TSIII BA

- Имплантат погруженного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе11°.
- Супер-гидрофильная поверхность усиливает образование сгустков крови.
- Базовая поверхность SA покрыта высококачественной низкокristаллическим нано-НА покрытием.
- Биорезорбируемое покрытие предотвращает риск разлома или отслаивания.
- Конусообразный корпус имплантата обеспечивает высокую начальную стабильность.
- Мелкая резьба: Увеличение начальной стабильности в мягкой костной ткани.
- Штопорная резьба: обеспечивает эффективное самонарезание.
- Рекомендуемый вращающий момент при вкручивании: 40 Нем.

***Примечание:** при реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром не менее 4.5 мм.

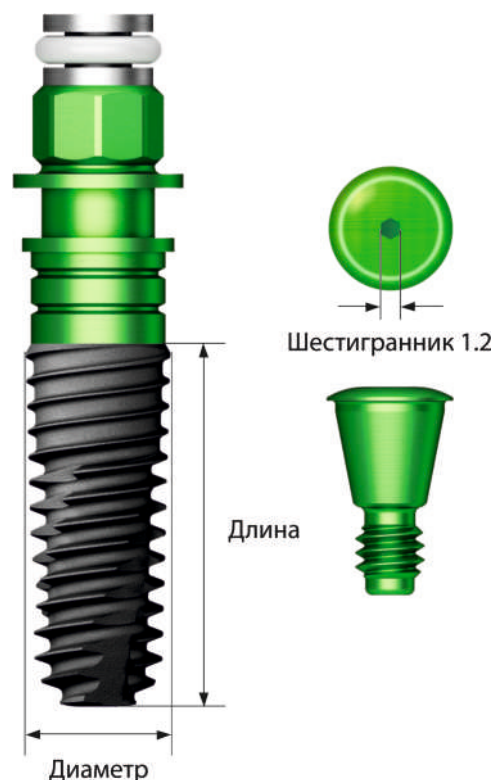

Имплантат с установочным адаптером
(имплантат + установочный адаптер+ винт- заглушка)
Код заказа: **B** + код имплантата (пример: **BTS3S4010B**)

Ø 3.5

Шестигранник 2.1



TS3M3508B TS3M3510B TS3M3511B TS3M3513B

Ø 4.0


Шестигранник 2.5



TS3S4007B TS3S4008B TS3S4010B TS3S4011B TS3S4013B

Ø 4.5

Шестигранник 2.5

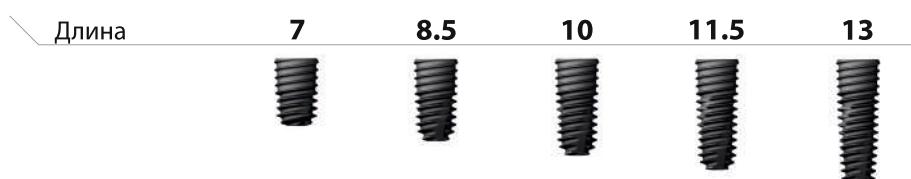

TS3S4507B TS3S4508B TS3S4510B TS3S4511B TS3S4513B

Ø 5.0

Шестигранник 2.5



Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS3S5007B	TS3S5008B	TS3S5010B	TS3S5011B	TS3S5013B

Имплантат TSIV SA


- Имплантат погруженного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°.
- Поверхность SA подвергается пескоструйной обработке оксидом алюминия и травления кислотой.
- Используется только для установки в верхнечелюстной и мягкой костной ткани.
- Мелкая резьба обеспечивает повышенную начальную стабильность имплантата в мягкой кости.
- Дизайн острой вершины: плотность кости D4 делает возможным установку имплантата диаметром 2 и 3 мм.
- Ограниченный вращающий момент при вкручивании: 40 Нсм.

Имплантат ультраширокий

- Используется при немедленной имплантации в лунку удаленного моляра и замене не прижившегося имплантата.
- Оптимальная конструкция вершины имплантата, которая позволяет получить устойчивое начальное крепление при установке даже на 3 мм ниже лунки зуба.
- Рекомендуемый вращающий момент при вкручивании: 40 Нсм.

***Примечание:** при реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром не более 4.5 мм

***Рекомендуемая скорость введения:** ниже 15 об/мин.
- Высокая скорость вкручивания имплантата в следствии большого шага резьбы.

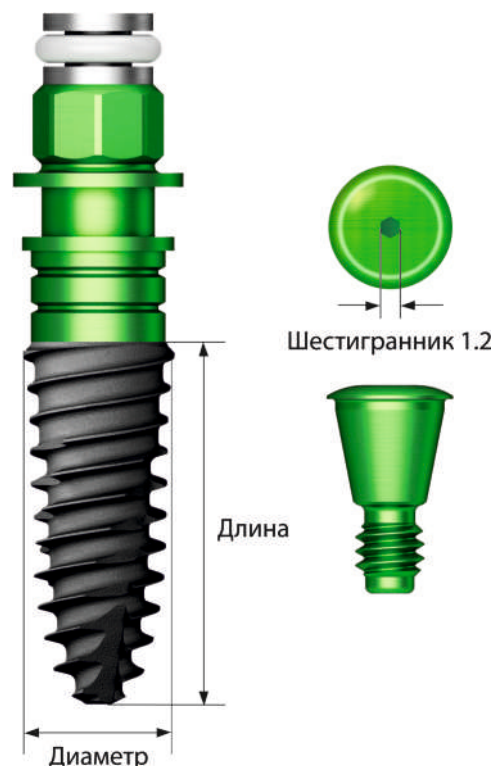

Имплантат без установочного адаптера

Код заказа: код имплантата (пример: TS4S40105)

Имплантат с Установочным Адаптером

(имплантат + установочный адаптер+винт-заглушка)

Код заказа: В + код имплантата (пример: BTS4S40105)

Ø 4.0 Шаг 0.8

Шестигранник 2.5



Длина	7	8.5	10	11.5	13
	TS4S4007S	TS4S4008S	TS4S4010S	TS4S4011S	TS4S4013S

Ø 4.5 Шаг 1.0

Шестигранник 2.5



Длина	7	8.5	10	11.5	13
	TS4S4507S	TS4S4508S	TS4S4510S	TS4S4511S	TS4S4513S

Ø 5.0 Шаг 1.2
Шестигранник 2.5


Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS4S5007S	TS4S5008S	TS4S5010S	TS4S5011S	TS4S5013S

Ультраширокий

Ø 6.0
Шестигранник 2.5


Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS4S6007S	TS4S6008S	TS4S6010S	TS4S6011S	TS4S6013S

Ø 7.0
Шестигранник 2.5


Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS4S7007S	TS4S7008S	TS4S7010S	TS4S7011S	TS4S7013S